





Закройте глаза и попробуйте представить мир черно-белым: Вы сразу поймете, насколько цвета важны в нашей жизни и насколько важно, чтобы наш организм и все наши органы чувств взаимодействовали с ними. Мы живем в цветном мире, где любые цвета и даже их оттенки постоянно влияют на наше тело и сознание.


Много лет назад ученые и врачи осознали огромный потенциал влияния цвета на организм и заложили основы **цветотерапии**. Теперь множество людей оценили преимущества лечения цветом: Цветотерапия БИОПТРОН, созданная по уникальной технологии, позволяет Вам применять свет и цвет, не выходя из своего дома.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ БИОПТРОН является результатом огромного опыта, накопленного в области лечения светом и цветом. Цветотерапия работает двумя основными способами: **направлением биоинформации на акупунктурные точки или стимуляцией чакр**. Комбинация этих двух способов лечения и уникальность цветовых фильтров делает приборы БИОПТРОН абсолютно инновационными среди домашних приборов для цветотерапии.

Цветотерапия – это метод, который использует баланс **цвета и света** и увеличивает нашу энергию для того, чтобы держать наши разум, тело и душу в состоянии **здравья, ощущения легкости бытия и гармонии**.

Цвет – это колебания световых волн, которые могут ослабить или усилить нашу энергию. Цветотерапия не может заменить традиционное медицинское лечение какой-либо патологии, но если Вам нужно **восстановить баланс тела и души**, цветотерапия станет **эффективным лечебным методом**.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА НОВОМ УРОВНЕ

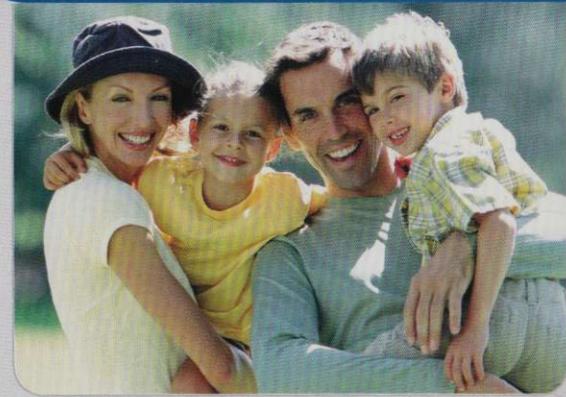

ЦВЕТОТЕРАПИЯ



ЦВЕТОТЕРАПИЯ БИОПТРОН: ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И РАЗУМА



БИОПТРОН Компакт III

7 цветных фильтров для стимуляции чакр



Косметические продукты:



Крем Crystal Cream
Лосьон Light Fluid
Гель Balancing Gel

Свет БИОПТРОН поляризован; электромагнитные волны поляризованного света колеблются только в параллельных плоскостях, тем самым усиливая его проникающую способность. При этом свет БИОПТРОН не содержит ультрафиолетовое излучение и не производит излишнее тепло: поэтому приборы БИОПТРОН – это **безопасные приборы, не имеющие побочных эффектов**.

Цвето- и светотерапия направлены на лечение причины заболевания, а не симптомов, создавая баланс внутри организма путем **физической и эмоциональной стимуляции**. Цветотерапия БИОПТРОН основана на **2-х принципах цветотерапии** – концепции биоинформации на биологически активные точки и стимуляции чакр, используя преимущества:

- Света
- Цветных фильтров
- 3-х косметических продуктов: лосьона Light Fluid, геля Balancing Gel и крема Crystal Cream

Цветотерапия БИОПТРОН **неинвазивна, безопасна и эффективна**. Она позволит Вам чувствовать себя лучше с насыщенными цветами и с уникальными, обогащенными биоинформацией эфирными маслами и экстрактами, входящими в состав косметических продуктов.




BIOPTRON® COLOR THERAPY

By Zepter Group


ЦВЕТА И ИХ СВОЙСТВА

Красный

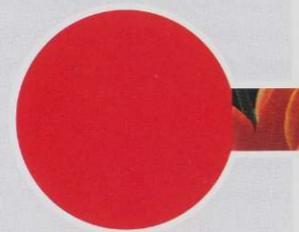


КРАСНЫЙ цвет представляет здоровье, огонь, жар, кровь, страсть, волю, выживание, ярость, темперамент, опасность, разрушение. Он стимулирует, возбуждает и действует как раздражитель. Он дает человеку чувство власти. Он используется для дополнительной энергии, поощрения движения, мгновенного ответа, страсти. Обычно используется для останавливающего сигнала светофора, Красного Креста и пр.

Оранжевый

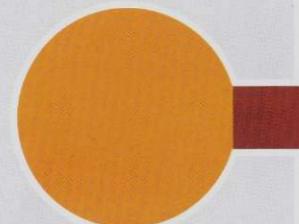

ОРАНЖЕВЫЙ – это счастливый, радостный, творческий и теплый цвет, сочетающий физическую энергию и умственные способности. Это цвет творчества и приспособляемости. Он вызывает общее чувство здоровья, благополучия и жизнерадостности. Оранжевый цвет символизирует теплоту и процветание и соотносится с чувством собственного достоинства: например, оранжевая стена в столовой говорит о единстве семьи, оранжевый закат способствует релаксации.

Желтый

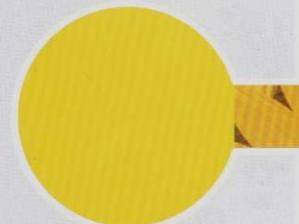

ЖЕЛТЫЙ – это цвет интеллекта и осмысливания. В древние времена это был цвет, который символизировал жизнь и радость. Желтый цвет соотносится с нашей самооценкой и тем, что мы чувствуем по отношению к себе. Это цвет индивидуальности и эго. Он психологически полезен для лечения чувства угнетенности и меланхолических состояний. Это цвет четкого мышления, отстраненности, яркости, уверенности, шарма. Например, бизнесменам рекомендуется носить желтые галстуки для повышения уверенности в себе.

ЗЕЛЕНЫЙ – это цвет любви, прогресса, юности, неопытности, плодородия, надежды и новой жизни. Это также цвет ревности, зависти и предрассудков, так как это цвет чувств. Кроме того, это успокаивающий и утешающий цвет. Хирурги носят одежду такого цвета, чтобы успокоить пациентов. Зеленый цвет не только повышает иммунитет, но и помогает бороться со стрессом, например, прогулка по зеленым лугам прекрасно расслабляет.



ГОЛУБОЙ, с психологической точки зрения, при эмоциональных сложностях успокаивает лучше, чем зеленый. Это цвет медитации и духовного совершенствования, поскольку расслабляет разум. Голубой – цвет правды, привязанности, спокойствия и искренности. Это цвет высших нравственных качеств. Голубой цвет связан с самовыражением. Он является цветом мира, комфорта и надежности. Голубой цвет в больницах поддерживает спокойствие, терпение и здоровье, а голубые костюмы персонала олицетворяют безопасность и надежность.



СИНИЙ, с психологической точки зрения, является хорошим цветом для повышения дисциплины, структурированности, доверия и продуктивности. Он также помогает избавиться от навязчивых эмоций. Синий цвет повышает чувство ответственности за свои поступки. Он символизирует структуру, сосредоточенность и обязательность: например, темно-синий деловой костюм, школьные формы и т.д.



ФИОЛЕТОВЫЙ, с психологической точки зрения, связан с самопознанием и духовным осознанием. Также рассматривается как восстанавливающий цвет, способствующий единению этого и духовности. Это очень сильный цвет, его использование не рекомендуется для детей. Способствуя релаксации, цвет духовности используется в храмах (чтобы чувствовать себя ближе к Богу, для ощущения комфорта и понимания), в комнатах психологической разгрузки, домах престарелых; он также отвлекает внимание людей от повседневных забот.



Зеленый



Голубой



Синий



Фиолетовый



BIOPTRON
COLOR THERAPY

By Zester Group

**ЦВЕТОТЕРАПИЯ
ПУТЕМ СТИМУЛЯЦИИ ЧАКР**



БИОПТРОН Компакт III

7 цветных фильтров для стимуляции чакр



Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Голубой
Синий
Фиолетовый



БИОПТРОН Про 1

7 цветных фильтров
для стимуляции чакр
БИОПТРОН Про 1

Основная на принципе стимуляции чакр цветом Цветотерапия БИОПТРОН оснащена 7-ю цветными фильтрами для эффективной стимуляции чакр в дополнение к концепции биоинформации.

Цветотерапия работает с **7-ю основными чакрами**, являющимися энергетическими центрами человека. Каждая чакра представляет собой пульсирующую воронку энергии. Они – наши цветные батареи: когда они полностью заряжены, мы находимся в состоянии равновесия, здоровья и хорошего самочувствия; когда одна из них опустошается, страдает весь наш организм. Целью цветотерапии является обеспечение наполнения «батарей чакр».

Частота, соответствующая каждому цвету спектра, соответствует частоте энергии каждой из 7-ми основных чакр тела, а также частоте **органов, мышц и костей**, расположенных в районе чакры. Например, оранжевый цвет соотносится с сакральной чакрой, а также с яичниками, семенниками, почками, селезенкой, кишечником и областью поясницы. Чакры также связаны с **железами внутренней секреции**, вырабатывающими гормоны.

В таблице ниже представлены примеры традиционного применения.

Семь цветных фильтров Цветотерапии БИОПТРОН **могут применяться для активации отдельных чакр**, оказывая сильное воздействие на наш организм, разум и душу. Если чакра перенасыщена соответствующим цветом, он может быть уравновешен противоположным цветом.

ЧАКРА	ЦВЕТ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ	ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТИМУЛ	ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
основная	красный	копчик	надпочечники, прямая кишка	адреналин	страх или отвага, самоуверенность
сакральная	оранжевый	нижняя часть живота	яичники, семенники, почки, кишечник	половые гормоны	удовольствие, самоуважение
солнечного сплетения	желтый	солнечное сплетение	поджелудочная железа, печень, ЖКТ, кожа	инсулин	ясность, чувство собственного достоинства
сердечная	зеленый	сердце	вилочковая железа, иммунная система, система кровообращения, легкие	тимозин	сострадание, любовь
горловая	голубой	горло	щитовидная железа, респираторная система	тироксин	общение, самовыражение
лобная	синий	лоб	гипофиз, глаза, пазухи носа	стимулирующие гормоны	интуиция, ответственность
коронная	фиолетовый	макушка головы	эпифиз, головной мозг, нервная система	мелатонин	озарение, самопознание

Ц В Е Т О Т Е Р А П И Я ● ● ● ● ● ● ●

КАК ПРИМЕНЯТЬ ЦВЕТА ДЛЯ СТИМУЛИАЦИИ ЧАКР

ОСНОВНАЯ ЧАКРА – КРАСНЫЙ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО КРАСНЫЙ	ОБЛАСТЬ	ВРЕМЯ
стимулирует и возбуждает нервы, благодаря чему он считается полезным при нарушениях обоняния, осознания, зрения, слуха, а также вкусовой чувствительности	основная чакра	красный 10 мин. голубой 2 мин. в течение 3-х недель
стимулирует кровообращение; применяется при чувстве холода	основная чакра	красный 20 мин. голубой 5 мин.
восстанавливает утраченную энергию	основная чакра	красный 15 мин. голубой 3 мин., по необходимости
насыщает печень энергией	справа от желудка	красный 3-5 мин. голубой 1 мин. в течение 1 недели
полезен для мышечной системы при лечении люмбаго	на большую мышцу	красный 10 мин. голубой 2 мин. дважды в день, пока не стихнет боль
снимает суставные боли	на область боли	красный 5 мин. голубой 1 мин. пока не стихнет боль

САКРАЛЬНАЯ ЧАКРА – ОРАНЖЕВЫЙ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОРАНЖЕВЫЙ	ОБЛАСТЬ	ВРЕМЯ
мягко стимулирует ритм сердца, не влияя на кровяное давление; используется при болезнях сердца на фоне низкого кровяного давления	сакральная чакра	оранжевый 3-5 мин. синий 1 мин. 1 раз в день до наступления улучшения
оказывает положительное воздействие при разрывах связок или переломах костей	на область повреждения	оранжевый 3-5 мин. синий 1 мин. дважды в день до полного выздоровления
является безвредным антидепрессантом	сакральная чакра	оранжевый 5 мин. синий 1 мин. ежедневно до улучшения самочувствия
облегчает менструальные боли, а также дисбаланс при менопаузе	сакральная чакра	оранжевый 5 мин. синий 1 мин. в течение 5 дней
стимулирует выработку молока после рождения ребенка	на каждую грудь	оранжевый 3 мин. синий 1/2 мин. 1 раз в день
улучшает состояние легочной ткани	на проекцию легких	оранжевый 3 мин. синий 1/2 мин. в течение недели

СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ – ЖЕЛТЫЙ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЖЕЛТЫЙ	ОБЛАСТЬ	ВРЕМЯ
положительно влияет на нервы и нервную систему; используется для укрепления нервов и стимуляции мозговой деятельности	солнечное сплетение	желтый 10 мин. фиолетовый 2 мин.
очищает кровь путем стимуляции лимфатической системы	солнечное сплетение	желтый 3-5 мин. фиолетовый 2 мин. в течение 3-х недель, желательно сочетание с легкой диетой
помогает при запорах	на пупок	желтый 10 мин. фиолетовый 2 мин. до выздоровления
положительно влияет при умственном переутомлении	солнечное сплетение	желтый 15 мин. фиолетовый 3 мин. в течение 2-3 дней
способствует пищеварению; снижает кислотность	солнечное сплетение	желтый 20 мин. фиолетовый 5 мин.
обладает регенерирующим действием на кожу	солнечное сплетение и участок кожи	желтый 10 мин. фиолетовый 2 мин. один раз в неделю

BIOPTRON® 

By Zepter Group

КАК ПРИМЕНЯТЬ ЦВЕТА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ЧАКР

СЕРДЕЧНАЯ ЧАКРА – ЗЕЛЕНЫЙ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЗЕЛЕНЫЙ
влияет на симпатическую нервную систему (часть центральной нервной системы), снимает спазм сосудов и снижает кровяное давление
тонизирует
снимает эмоциональное напряжение
укрепляет ткани и мышцы
помогает при лечении шокового состояния
выступает в роли мягкого дезинфицирующего и бактерицидного средства, обладает антисептическим действием

	ОБЛАСТЬ	ВРЕМЯ
	сердечная чакра	зеленый 5 мин. красный 1/2 мин. до наступления улучшения
тонизирует	сердечная чакра в области позвоночника	зеленый 20 мин. красный 2 мин.
снимает эмоциональное напряжение	сердечная чакра	зеленый 10 мин. красный 1 мин.
укрепляет ткани и мышцы	на ослабленные мышцы	зеленый 10 мин. красный 1/2 мин. до наступления улучшения
помогает при лечении шокового состояния	сердечная чакра	зеленый 10 мин. красный 1/2 мин.
выступает в роли мягкого дезинфицирующего и бактерицидного средства, обладает антисептическим действием	на область повреждения	зеленый 20 мин. красный 1 мин.

ГОРЛОВАЯ ЧАКРА – ГОЛУБОЙ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ГОЛУБОЙ
обладает охлаждающим эффектом при воспалениях
улучшает метаболизм, повышает жизненный тонус
снижает нервное возбуждение
помогает при боли в горле, ларингитах, тонзиллитах, язвах полости рта, заложенности ушей
успокаивает гиперактивных детей
ускоряет заживление при ожогах

	ОБЛАСТЬ	ВРЕМЯ
	горловая чакра	голубой 10 мин. красный 1 мин. дважды в день до наступления улучшения
	горловая чакра	голубой 10 мин. красный 1 мин. один раз в неделю
	горловая чакра, задняя поверхность шеи	голубой 20 мин. красный 2 мин.
	горловая чакра	голубой 10 мин. красный 1 мин. дважды в день
	на область ожога	голубой 10 мин. красный 1/2 мин. дважды в день, до наступления улучшения

ЛОБНАЯ ЧАКРА – СИНИЙ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО СИНИЙ
является лучшим средством от бессонницы
ускоряет регенерацию тканей
помогает при острых проблемах с пазухами
облегчает боли в спине
помогает уменьшить кровотечение
положительно влияет при лечении экземы
на участки поражения

	ОБЛАСТЬ	ВРЕМЯ
	лобная чакра	синий 10 мин. оранжевый 1 мин.
	на раны, ожоги	синий 5 мин. оранжевый 1 мин. по мере необходимости
	лобная чакра, глаза	синий 5 мин. оранжевый 1 мин. дважды в день по мере необходимости
	лобная чакра и область боли	синий 10 мин оранжевый 1 мин.
	на кровоточащую область	синий 20 мин оранжевый 2 мин.
	на участки поражения	синий 5 мин. оранжевый 1 мин. в течение недели



КОРОННАЯ ЧАКРА – ФИОЛЕТОВЫЙ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ФИОЛЕТОВЫЙ	ОБЛАСТЬ	ВРЕМЯ
улучшает состояние людей с психическими расстройствами	от коронной чакры до затылка	фиолетовый 10 мин. желтый 1 мин. в течение недели
является кожным антисептиком	на проблемные участки кожи	фиолетовый 5 мин. желтый 1 мин.
стимулирует выработку лейкоцитов в селезенке	на область селезенки	фиолетовый 15 мин. желтый 1 мин. в течение недели
способствует расширению сосудов, снижает кровяное давление	коронная чакра	фиолетовый 10 мин. желтый 1 мин. в течение недели
обладает успокаивающим действием на нервную систему и сердце, уменьшает головные боли	от коронной чакры до затылка	фиолетовый 15 мин. желтый 1 мин.
помогает при головных болях, проблемах с кожей головы и сотрясениях	коронная чакра	фиолетовый 15 мин. желтый 1 мин.

КОРОННАЯ

ЛОБНАЯ

ГОРЛОВАЯ

СЕРДЧЕНАЯ

СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ

САКРАЛЬНАЯ

ОСНОВНАЯ


BIOPTRON® 
COLOR THERAPY By Zepter Group

**ЦВЕТОТЕРАПИЯ БИОПТРОН
Компакт III С ПОМОЩЬЮ
БИОИНФОРМАЦИИ**



БИОПТРОН Компакт III

6 обогащенных биоинформацией цветных фильтров для концепции биоинформации

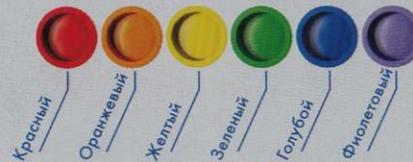

Косметические продукты:



Крем Crystal Cream
Лосьон Light Fluid
Гель Balancing Gel

БИОПТРОН Компакт III является **уникальным прибором для цветотерапии**, произведенным в **Швейцарии**, который применяется с обогащенными биоинформацией цветными фильтрами, сочетая стимуляцию биологически активных точек с основанной на теории чакр цветотерапией. **Теория биоинформации** основана на предположении о том, что человеческий организм постоянно излучает электромагнитные волны, которые некоторые люди называют аурой. Это **электромагнитное поле**, окружающее тело, является светом, выделяемым телом: таким образом, мы – «живые фотоэлементы», не сильно отличающиеся от растений, и световой фотосинтез соответствует метаболизму в нашем организме.

Электромагнитное поле, окружающее любое живое существо, дает необходимую информацию о каждом отдельном организме: именно эта информация, в сочетании с состоянием физического тела, называется **биоинформацией**.

Биоинформацией обладают **растения, драгоценные камни, металлы, минералы, микроэлементы, а также инертные газы, ферментирующие вещества** и т.д.

После нанесения на подходящие носители, они могут определенным образом воздействовать на процесс самовосстановления нашего организма. С помощью электромагнитного поля, тело получает потоки жизненно важной биоинформации.

Цветной свет и растительные экстракты Цветотерапии БИОПТРОН Компакт III: при воздействии на весь организм или отдельные органы они восстанавливают гармонию и хорошее самочувствие.



Ц В Е Т О Т Е Р А П И Я ● ● ● ○ ○ ○

ЦВЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ БИОПТРОН Компакт III

Цветные фильтры для Цветотерапии БИОПТРОН Компакт III **сделаны вручную французскими мастерами** из Сен-Жюста, где традиционно стеклодувы производят стекло исключительной яркости и высокой прозрачности. Каждый цветной фильтр из высококачественного стекла обеспечивает **оптимальное преломление** света, ярчайший цвет и пропускает только строго определенную часть светового спектра.

Стеклянные фильтры производятся во Франции, после чего они обогащаются **биоинформацией**.*

Система биофизического обогащения, используемая в фильтрах, была разработана эксклюзивно для компании **BIOPTRON AG Институтом Биоинформации в Цюрихе**.

*6 стеклянных фильтров обогащены биоинформацией; синий фильтр изготовлен из специального гладкого окрашенного стекла.



BIOPTRON® 
COLOR THERAPY
By Zepter Group

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ЦВЕТОТЕРАПИИ БИОПТРОН

ОСОБЕННОЕ СОЧЕТАНИЕ СИЛЫ ЦВЕТА И АРОМАТОВ

Цветотерапия БИОПТРОН Компакт III, специально разработанная для применения на акупунктурные точки, дополнена тремя косметическими продуктами высочайшего качества, обогащенными биоинформацией, которые подготавливают и расслабляют вашу кожу для лучшего восприятия цветного света и для достижения более длительного эффекта.

- Лосьон Light Fluid
- Гель Balancing Gel
- Крем Crystal Cream

Они являются составной частью и необходимым дополнением наполненной биоинформацией цветотерапии на биологически активные точки.

Эти три продукта сделаны из лучших настоев, экстрактов и эфирных масел, соединенных вместе для того, чтобы привнести гармонию и равновесие в ваш организм. Сделанные только из чистых, натуральных продуктов, таких, как кокосовый орех, кукуруза, пальмовая косточка, эта смесь экстрактов и цветов обогащена биоинформацией, которая делает цветотерапию акупунктурных точек более эффективной и приятной.

Лосьон, гель и крем используются в соответствии с пятью различными комплексными программами, специально разработанными для цветотерапии БИОПТРОН Компакт III.

Эти три продукта поставляются в одной упаковке с Цветотерапией БИОПТРОН Компакт III, но могут быть приобретены по отдельности.

Для применения цветотерапии БИОПТРОН Компакт III на биологически активные точки были специально разработаны 12 терапевтических программ. Пожалуйста, узнайте о них больше для получения наилучших результатов при применении этого уникального устройства для цветотерапии.

КАК ПРИМЕНЯТЬ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

- **Лосьон Light Fluid:** распылите Лосьон Light Fluid на область воздействия. Оставьте на короткий промежуток времени, затем сотрите пот и частицы пыли, растворенные на поверхности кожи. Люди, чувствительные к воздействию эфирных масел, могут испытать короткое (абсолютно безвредное) жжение в глазах. В таком случае не распыляйте лосьон Light Fluid на область вокруг глаз.
- **Гель Balancing Gel:** подставьте ладонь под носик флакона и нажмите на дозатор. Распределите гель по области воздействия.
- **Крем Crystal Cream:** подставьте ладонь под носик флакона и нажмите на дозатор. Распределите крем по области воздействия.



12 ПРОГРАММ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

КАК ПРИМЕНЯТЬ БИОПТРОН Компакт III

Соблюдая расстояние около 10 см, направьте луч цветного света БИОПТРОН на предполагаемую область воздействия. Воздействуя на небольшую область, полностью освещаемую лучом, держите прибор неподвижно. Воздействуя на большую область вашего тела, медленно продвигайте прибор, чтобы постепенно осветить всю поверхность. Поспешные движения могут привести к утомлению и помешать процессу терапии.

КАК ПРИМЕНЯТЬ ЦВЕТНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Для начала аккуратно извлеките установленный в заводских условиях оригинальный фильтр, который является неотъемлемой частью светотерапии БИОПТРОН, но не нужен для цветотерапии. Вставьте в прибор нужный цветофильтр, не прикладывая особых усилий. После использования осторожно извлеките его. Храните цветофильтры в месте, где обеспечивается максимальная защита от пыли.

Время от времени чистите их с помощью мягкой влажной ткани.

Не применяйте агрессивные моющие средства и, ни в коем случае, не мойте фильтры из цветного стекла в посудомоечной машине. Пожалуйста, не меняйте программу терапии. Её последовательность определяется энергетическими и динамическими взаимосвязями, которые затрагивает данная программа.

Цветотерапия БИОПТРОН является комплексной программой самопомощи.

Она не заменяет медицинское лечение болезней с установленным диагнозом.

Цветотерапия применяется вместе с медицинским прибором для светотерапии БИОПТРОН, в котором оригинальный фильтр заменяется цветными фильтрами. Поскольку цветные стекла для фильтров изготавливаются вручную из дутого стекла, на них возможно наличие небольших неровностей (маленькие пузырьки или пятнышки). Эти неровности не влияют на терапевтический эффект.

12 программ терапии для наилучшего применения Цветотерапии БИОПТРОН Компакт III объединены в 5 основных разделов.

Необходимо последовательно и внимательно следовать программам терапии для достижения наилучших результатов. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с дальнейшими инструкциями.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ

- 1 – ДЕФИЦИТ ЭНЕРГИИ
- 2 – ОСЛАБЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ И ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ

ЗАЩИТНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА

- 1 – УКРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ

- 1 – ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ
- 2 – ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ИСКРА
- 3 – РАЗРЯДКА ПРИ ЧУВСТВЕ СТРАХА
- 4 – ДЕБЛОКИРОВАНИЕ ПРИ СТРЕССЕ
- 5 – НОРМАЛИЗАЦИЯ СНА

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

- 1 – РАЗГРУЗКА ОРГАНИЗМА И ВЫВЕДЕНИЕ ШЛАКОВ
- 2 – ПИЩЕВАРЕНИЕ

КОЖА И ТКАНИ ОРГАНИЗМА

- 1 – ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА НА ЛИЦЕ И ТЕЛЕ
- 2 – ЧУВСТВО ТЯЖЕСТИ В НОГАХ И СТУПНЯХ

BIOPTRON®
COLOR THERAPY

By Zepter Group

ЗАЩИТНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА

Сопротивляемость вашего организма возрастет, и вы почувствуете себя полными сил.

Программа 1 УКРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА

Смотри примечание к применению **B**

УТРЕННИЙ СЕАНС 20 мин.

1 – ПОЛОСЬ РТА И ЗЕВ

Оранжевый

2 мин.



2 – ШЕЯ И КЛЮЧИЦЫ

Лосьон Light Fluid на область шеи и ключицы

Красный 1 мин. на шею под нижней челюстью слева направо

Гель Balancing Gel на область шеи и ключицы

3 – ГРУДИНА на ширину ладони ниже межключичной впадины (вилочковая железа)

Лосьон Light Fluid

Зеленый

1 мин.

4 – СЕЛЕЗЕНКА

Лосьон Light Fluid

Желтый

2 мин.

Гель Balancing Gel

5 – РУКИ промежуток между большими и указательными пальцами («мягкий треугольник»)

Лосьон Light Fluid

Желтый

по 1 мин. на левую и правую руки

6 – ПОДОШВЫ НОГ

Лосьон Light Fluid

Гель Balancing Gel

ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС (за 1 час до сна) 7 мин.

1 – ОБЛАСТЬ КОПЧИКА

Лосьон Light Fluid

Красный

2 мин.



2 – ПУПОК

Лосьон Light Fluid

Оранжевый

2 мин.



3 – ГРУДИНА на ширину ладони ниже межключичной впадины (вилочковая железа)


Лосьон Light Fluid

Зеленый

1 мин.

4 – ОБЛАСТЬ КОПЧИКА, ПУПОК, ГРУДИНА (по всей длине)

Крем Crystal Cream

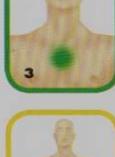

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ

Вы будете чувствовать себя более уравновешенно, спокойно и уверенно

Программа 1 ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ 12 мин.


Смотри примечание к применению **C**

1 – ЛИЦО, ШЕЯ, ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ШЕИ

Лосьон Light Fluid

Фиолетовый

по 1 мин. от пятки к большому пальцу на левой и правой ступне

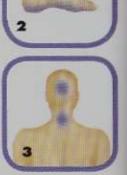

3 – ШЕЯ, СЕРЕДИНА ЗАТЫЛКА

Фиолетовый 2 мин.

4 – ЛИЦО, ШЕЯ, ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ШЕИ

Гель Balancing Gel

Желтый по 1 мин. от пятки к большому пальцу на левой и правой ступне



5 – СТУПНИ внутренний край ступни (рефлекторная зона позвоночного столба)

Лосьон Light Fluid

Зеленый

Крем Crystal Cream

Дополнительно!

дополнительно наносите крем Crystal Cream дважды в день на область солнечного сплетения



6 – СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

Лосьон Light Fluid

Зеленый

Крем Crystal Cream

Дополнительно!

дополнительно наносите крем Crystal Cream дважды в день на область солнечного сплетения



«Воспламеняющая искра» будет дарить вам силы снова и снова, восполняя запас умственной и душевной энергии.

Программа 2 ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ИСКРА 10 мин.

Смотри примечание к применению **G**

1 – ЛИЦО, ШЕЯ, ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШЕИ, ГРУДИНА на ширину ладони ниже межключичной впадины (вилочковая железа)
ПУПОК в радиусе 4 см
ЖИЗНЕННЫЙ ЦЕНТР ХАРА на 3 пальца ниже пупка
ОБЛАСТЬ КОПЧИКА
Лосьон Light Fluid

2 – СЕРЕДИНА ЛБА
Желтый 1 мин.

3 – МАКУШКА (высшая точка на черепе)
Фиолетовый 1 мин.

4 – ШЕЯ впереди (щитовидная железа)
Оранжевый 1 мин.

5 – ПУПОК в радиусе 4 см
Красный 1 мин.

6 – ОБЛАСТЬ КОПЧИКА
Красный 1 мин.

7 – ЖИЗНЕННЫЙ ЦЕНТР ХАРА на 3 пальца ниже пупка
Зеленый 1 мин.

8 – ГРУДИНА на ширину ладони ниже межключичной впадины (вилочковая железа)
Голубой 1 мин.

9 – СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ, А ТАКЖЕ ЛИЦО, ШЕЯ, ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ШЕИ
Крем Crystal Cream

Вы обретете душевное спокойствие, восстановите внутреннюю гармонию и снова почувствуете себя в безопасности

Программа 3 РАЗРЯДКА ПРИ ЧУВСТВЕ СТРАХА 13 мин.

Смотри примечание к применению **D**

1 – ЛИЦО, ШЕЯ, ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШЕИ, УШИ в радиусе 2 см
Лосьон Light Fluid

2 – ЛЕВОЕ УХО в радиусе 2 см
Голубой 1 мин.

3 – ПРАВЫЙ ГЛАЗ (закрытый)
Голубой 1 мин.

4 – ПЕРЕНОСИЦА на ширину 1 пальца вверх (область «третьего глаза»)
Фиолетовый 1 мин.

5 – ПРАВОЕ УХО, в радиусе 2 см
Зеленый 1 мин.

6 – ЛЕВЫЙ ГЛАЗ (закрытый)
Зеленый 1 мин.

7 – СЕРЕДИНА ЗАТЫЛКА
Фиолетовый 2 мин.

8 – РУКИ внешний край запястья
Зеленый по 1 мин. на правую и левую руки

9 – СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ, ЛИЦО, ШЕЯ, ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ШЕИ, УШИ в радиусе 2 см
Крем Crystal Cream

Улучшение циркуляции энергии укрепит Ваше физическое состояние и поможет шаг за шагом выйти из скорлупы, в которую вас загнал стресс

Программа 4 ДЕБЛОКИРОВАНИЕ ПРИ СТРЕССЕ 15 мин.

Смотри примечание к применению **F**

1 – РУКИ внешний край запястья
Зеленый по 2 мин. на правую и левую руки

2 – ГРУДИНА на ширину ладони ниже межключичной впадины (вилочковая железа)
Лосьон Light Fluid

3 – СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ
Лосьон Light Fluid

4 – ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ под глазами
Желтый 2 мин.
Крем Crystal Cream

5 – ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
фиолетовый по 1 мин. на левой и правой сторонах лица

6 – ОБЛАСТЬ ПОЧЕК
Голубой 1 мин.
Гель Balancing Gel

7 – ЛИЦО, ШЕЯ И ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ШЕИ
Лосьон Light Fluid
Крем Crystal Cream

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Вас ожидает спокойный, приносящий отдых сон и приятные сновидения!

Программа 5 (за 1 час до сна) 20 мин.
НОРМАЛИЗАЦИЯ СНА

Смотри примечание к применению D

1 – ПОЯС СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ
печень – желчный пузырь – желудок – селезенка

Лосьон Light Fluid

Зеленый 2 мин. на пояс солнечного сплетения



2 – СЕЛЕЗЕНКА

Лосьон Light Fluid

Фиолетовый 2 мин.



3 – ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ

Оранжевый 2 мин.



4 – ПОЯС СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ

печень – желчный пузырь – желудок – селезенка
ГРУДИНА

на ширину ладони ниже межключичной впадины
(вилочковая железа)

Крем Crystal Cream

5 – РУКИ
внешний край запястья

Синий по 1 мин. на левую и правую руки



6 – НОГИ И СТУПНИ

Гель Balancing Gel



Вы почувствуете легкость, обновление и прилив свежих сил. Окружающие будут осыпать вас комплиментами по поводу изменений в вашей внешности.

Программа 1
РАЗГРУЗКА ОРГАНИЗМА
И ВЫВЕДЕНИЕ ШЛАКОВ

Смотри примечание к применению B

1 – ЯЗЫК И КОРЕНЬ ЯЗЫКА

Оранжевый 2 мин. на язык
30 сек. на корень языка (язык приподнять)



2 – РУКИ
от кончиков пальцев по внешней стороне рук
к плечевому суставу

Лосьон Light Fluid
голубой по 2 мин. на левую и правую руки



3 – ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ

Лосьон Light Fluid
Зеленый 2 мин.

Гель Balancing Gel


4 – СЕРЕДИНА ТУЛОВИЩА
от пупка к области мочевого пузыря

Лосьон Light Fluid
Оранжевый 2 мин.

Гель Balancing Gel

5 – ЖИВОТ, ПАХ, ПОЧКИ И ПОЗВОНОЧНИК

Гель Balancing Gel



Программа 2
ПИЩЕВАРЕНИЕ

Смотри примечание к применению D

1 – ЖЕЛУДОК И СЕЛЕЗЕНКА

Лосьон Light Fluid
Оранжевый 2 мин.

Крем Crystal Cream

2 – СТУПНИ
внутренний край стопы (рефлекторная зона позвоночного столба)

Лосьон Light Fluid
Оранжевый по 1 мин. от пятки к большому пальцу на левой и правой ступне

Крем Crystal Cream

3 – ЖИВОТ (область кишечника)

Лосьон Light Fluid
Зеленый 3 мин.

Гель Balancing Gel

4 – РУКИ
между большим и указательным пальцем
(«мягкий треугольник»)

Лосьон Light Fluid
Зеленый по 1 мин. на левую и правую руки

5 – ПЛЕЧИ
от шеи до плечевого сустава

Лосьон Light Fluid
Красный по 1 мин. на левое и правое плечо

Гель Balancing Gel

6 – СЕРЕДИНА ЗАТЫЛКА

Красный 1 мин.

ВАЖНО!

Смотри «ВАЖНО – ПРИМЕЧАНИЕ 1»

Смотри «ВАЖНО – ПРИМЕЧАНИЕ 1»

Смотри «ВАЖНО – ПРИМЕЧАНИЕ 2»



КОЖА И ТКАНИ ОРГАНИЗМА

Ваша кожа будет омолаживаться, а её дефекты – морщинки и признаки старения – исчезать.
Ваша внешность не останется незамеченной!

Программа 1 ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА НА ЛИЦЕ И ТЕЛЕ 10-15 мин.

Смотри примечание к применению D

1 – ЛИЦО, ШЕЯ, КЛЮЧИЦЫ И ПОЯС СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ
печень – желчный пузырь – желудок – селезенка
ПУПОК: в радиусе 4 см
СТУПНИ: сверху и снизу

Лосьон Light Fluid

Крем Crystal Cream

2 – СТУПНИ

Оранжевый по 1 мин. в поперечном направлении под бугром большого пальца стопы на левой и правой ноге (рефлекторная зона пояса солнечного сплетения и почек)

3 – ПОЯС СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ
печень – желчный пузырь – желудок – селезенка

Оранжевый 2 мин.

4 – ГОЛОВА
от верхней части лба через макушку к задней поверхности шеи

Фиолетовый по 1 мин. на 3 см слева и справа от средней линии головы

5 – ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК (УЧАСТИКИ) КОЖИ

Лосьон Light Fluid если он не наносится на эту зону согласно п. 1

Голубой 1-3 мин., в зависимости от размера проблемной зоны

Гель Balancing Gel если он не наносится на эту зону согласно п. 1

Желтый 1-3 мин., в зависимости от размера проблемной зоны

Крем Crystal Cream если у вас сухая кожа, наносите крем Crystal Cream несколько раз в день!

ВАЖНО

Смотри «ВАЖНО – ПРИМЕЧАНИЕ 1»

Смотри «ВАЖНО – ПРИМЕЧАНИЕ 2»

Вы будете чувствовать такую легкость, словно вы парите в облаках

Программа 2 ЧУВСТВО ТЯЖЕСТИ В НОГАХ И СТУПНЯХ 20 мин.

Смотри примечание к применению D

1 – ОБЛАСТЬ ПАХА, НОГИ, СТУПНИ

Лосьон Light Fluid
2 – ПОЯС СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ
печень – желчный пузырь – желудок – селезенка

Лосьон Light Fluid
Оранжевый 1 мин.

3 – ОБЛАСТЬ ПАХА

Красный по 1 мин. с левой и правой стороны паха

4 – НОГИ

Желтый по 2 мин. на каждую ногу вверх от лодыжки

Гель Balancing Gel на область паха, ноги и ступни

Дополнительно! нанесите гель Balancing Gel еще один раз в день на область паха, ноги и ступни.

5 – СТУПНИ

Оранжевый по 1 мин. на центр левой и правой предплюсны

Фиолетовый по 1 мин. в поперечном направлении под бугром большого пальца стопы на левой и правой ноге

Зеленый по 1 мин. на тыльную сторону левой и правой ступни

6 – ЯГОДИЦЫ

Лосьон Light Fluid

Желтый по 1 мин. слева и справа

Гель Balancing Gel

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

A Очень важно регулярно проходить эту программу, особенно в стрессовых ситуациях:

- 4 раза в неделю, в идеале ежедневно
- Рекомендуемая продолжительность: 2 недели

B Очень важно регулярно проходить эту программу, особенно в стрессовых ситуациях:

- 4 раза в неделю, в идеале ежедневно
- Рекомендуемая продолжительность: 3 недели

C Очень важно регулярно проходить эту программу, особенно в стрессовых ситуациях:

- 5 раз в неделю, в идеале ежедневно
- Рекомендуемая продолжительность: 2 недели
- В ситуациях с незначительным стрессом может оказаться полезной разовая или краткосрочная терапия

D Очень важно регулярно проходить эту программу, особенно в стрессовых ситуациях:

- 5 раз в неделю, в идеале ежедневно
- Рекомендуемая продолжительность: 3 недели
- В ситуациях с незначительным стрессом может оказаться полезной разовая или краткосрочная терапия

E Очень важно регулярно проходить эту программу, особенно в стрессовых ситуациях:

- 5 раз в неделю, в идеале ежедневно
- Рекомендуемая продолжительность: 4 недели
- В ситуациях с незначительным стрессом может оказаться полезной разовая или краткосрочная терапия

F В стрессовой ситуации вы можете применять данную программу несколько раз в день с интервалом 1 час.

До тех пор, пока не уменьшится напряжение. Также возможно применять её регулярно, как краткосрочно, так и в течение длительного времени:


- 5 раз в неделю, в идеале ежедневно

G Эта оживляющая программа – настоящая «карманская аптека» для восстановления душевных сил. Её можно применять в любых случаях и сколь угодно долго.

ВАЖНО – ПРИМЕЧАНИЯ

1 Выпивайте 2-3 литра жидкости в день. Такие продукты как травяной чай, вода и фруктовый сок стимулируют выделительные процессы и освобождают организм от вредных продуктов обмена веществ.

2 Ешьте легкую и здоровую пищу. Откажитесь от сладостей и жирной, трудно перевариваемой пищи в вашем меню. Ограничьте вечерний прием пищи.

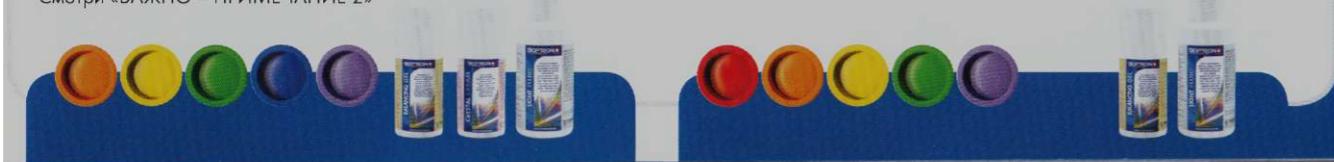

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ

Ваша слабость сменится приливом новых сил.

Программа 1 ДЕФИЦИТ ЭНЕРГИИ 15 мин.

Смотри примечание к применению **A**

1 – ПОЧКИ

Лосьон Light Fluid

Желтый по 2 мин. на область почек справа и слева



Гель Balancing Gel

2 – ПОЯС СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ печень – желчный пузырь – желудок – селезенка

Лосьон Light Fluid

Оранжевый

3 мин.

Гель Balancing Gel

3 – СТУПНИ

внутренний край стопы
(рефлекторная зона позвоночного столба)

Лосьон Light Fluid

Фиолетовый по 1 мин. от пятки к большому пальцу на правой и левой ноге



Крем Crystal Cream

4 – ГРУДИНА

на ширину ладони ниже межключичной впадины
(вилочковая железа)

Лосьон Light Fluid

Зеленый

1 мин.

Желтый

1 мин.

Crystal Cream

5 – ГРУДИНА

на ширину ладони ниже межключичной впадины (вилочковая железа)



Лосьон Light Fluid

Голубой

20 мин.



Программа 2 СЛАБАЯ СПОСОБНОСТЬ К КОНЦЕНТРАЦИИ И ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ

Смотри примечание к применению **E**

1 – ЛИЦО – ШЕЯ – КЛЮЧИЦЫ

Лосьон Light Fluid

2 – СТУПНИ

на верхнюю и нижнюю части стопы

Фиолетовый

по 1 мин. на верхнюю часть левой и правой стопы
по 1 мин. на левую и правую подошвы



Гель Balancing Gel

на верхнюю и нижнюю часть стоп

3 – КОЛЕНИ

внутренняя и внешняя поверхности

Лосьон Light Fluid

Голубой

по 1 мин. на левую и правую внутренние стороны
по 1 мин. на левую и правую внешние стороны



4 – ПУПОК

Лосьон Light Fluid

Зеленый

1 мин.

Крем Crystal Cream



5 – ГРУДИНА

на ширину ладони ниже межключичной впадины (вилочковая железа)

Лосьон Light Fluid

Голубой

1 мин.

Крем Crystal Cream



6 – ШЕЯ

впереди (щитовидная железа)

Желтый

1 мин.

7 – СЕРЕДИНА ЗАТЫЛКА

Красный

1 мин.

8 – ГОЛОВА – ГЛАЗА – ОТ УХА К УХУ ЧЕРЕЗ СВОД ЧЕРПЕРА

Оранжевый

1 мин. на закрытый правый глаз
1 мин. от левого уха к правому через свод черепа
1 мин. на закрытый левый глаз
1 мин. от правого уха к левому через свод черепа



9 – ЛИЦО – ШЕЯ – КЛЮЧИЦЫ

Гель Balancing Gel

Крем Crystal Cream

ССЫЛКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ЦВЕТОТЕРАПИИ

ANDERSON, MARY, Color Healing, The Aquarian Press, 1979

CAYCE, EDGAR, Auras, An Essay on the Meaning of Colors, A.R.E Press, 1973

CHIAZZARI, SUZY, The Complete Book of Color, Element, 1998

DALICHOW, IRENE and BOOTH, MIKE, Aura-Soma, Hay House Inc., 1996

DINSHAH, DARIUS, Let There Be Light, NJ USA, ISBN 0-933917-00-7

GIMBEL, THEO, Healing Through Color, The C.W.I. Daniel Company Ltd., 1980

GIMBEL, THEO, The Color Therapy Workbook, Element, 1993

GRAHAM, HELEN, Healing with Color, Newleaf, 1996

HOLBECHE, SOOZI, The Power of Gems and Crystals, Piatkus, 1989

KELLY, JOHN, The All-Seasons Garden, Windward, 1987

LACY, MARIE LOUISE, Know Yourself Through Color, The Aquarian Press, 1989

LACY, MARIE LOUISE, The Power of Color to Heal the Environment, Rainbow Bridge Publications, 1996

OUSELEY, S.G.J., Color Mediations, L.N. Fowler & Co. Ltd., 1949

POLUNIN, MIRIAM, Healing Foods, Dorling Kindersley, 1997

SUN, HOWARD & DOROTHY, Color Your Life, Piatkus, 1998

SUNDT, THERESA, Color Therapy Presentation 2007, www.color-discovery.com

SUNDT, THERESA, The Art of Color Therapy, 2007

VERNER-BONDS, LILLIAN, Color, Southwater, 1999

WALL, VICKY, the Miracle of Color Healing, Thorsons, 1995

WAUTERS, AMBIKA and THOMPSON, GERRY, Principles of Color Healing, Thorsons, 1997

WILLS, PAULINE, Working With Color, Hodder & Stoughton, 1999

BIOPTRON®
COLOR THERAPY

By Zeptron Group

